



prodia.

Vi gör skillnad i kampen för minskad droganvändning.

Prodia Workplace®

Drogtestning för arbetsplatser

För ökad säkerhet och trygghet,
bättre arbetsmiljö och mer
lönsamma arbetsplatser.



Prodia Professional®

Drogtester för vården

Pålitliga snabbtester och
laboratorieanalyser för detektion
av droger.



Hälsa, sjukvård & behandling

Snabbtester urin -analyser

Provtagning

- Socialstyrelsens riktlinjer
- Övervakad provtagning rekommenderas
- Inga jackor, mössor, väskor med in på wc
- Uppkavlade ärmor
- Neddragna byxor
- Preparerad WC med speglar





LITA Multi THC

THC	50
THC	200
THC	800
Urin-ID (Oxi-Krea-pH)	

LITA Multi 8 /Bup&Coc

AMP	300
BUP	10
BZO	200
COC	100
MET/	300
MDMA	500
OPI	200
THC	25

LITA Multi 11

AMP	300
BUP	10
BZO	200
COC	100
EDDP	100
MET/	300
MDMA	500
OPI	200
OXY	100
THC	25
TML	100

LITA Multi 13

AMP	300
BUP	10
BZO	200
COC	100
FYL	10
KET	1000
MET/	300
MDMA	500
MTD	300
OPI	200
OXY	100
THC	25
TML	100

LITA Multi 15


AMP	300
BUP	10
BZO	200
COC	100
EDDP	100
ETG	500
FYL	10
MET/	300
MDMA	500
MPD	150
OPI	200
OXY	100
THC	25
TML	100
ZOL	50

LITA Multi 17

ACL	100
AMP	300
BUP	10
BZO	200
COC	100
EDDP	100
ETG	500
FYL	10
MET/	300
MDMA	500
MPD	150
OPI	200
OXY	100
THC	25
TML	100
ZOL	50
ZOP	50

LITA Multi 21

ACL	100
AMP	300
BUP	10
BZO	200
COC	100
EDDP	100
ETG	500
FYL	10
GABA	2000
KET	1000
LSD	10
MET/	300
MDMA	500
MPD	150
OPI	200
OXY	100
PGB	500
THC	25
TML	100
ZOL	50
ZOP	50

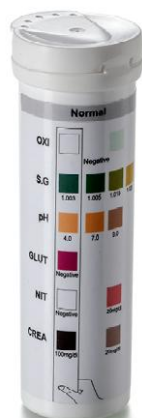


Urinkontroll

Kontrollera om urinen är manipulerad genom att doppa en Urin-ID-remsa i urinen. Avläs inom en minut och jämför med färgfälten på burken.



LITA Singel AMP	LITA Singel BZD	LITA Singel COC	LITA Singel OPI	LITA Singel THC	LITA Singel EtG	LITA Singel Kratom	LITA Singel 3CMC	LITA Singel NTZ	LITA Singel PY	LITA Singel BAR	LITA α-PVP
AMP 200	BZD 200	COC 100	OPI 200	THC 20	EtG 300	KRA 300	3-CMC/ 3-MMC 1000	NTZ 500	PY 500	BAR 200	α-PVP 500

prodia.

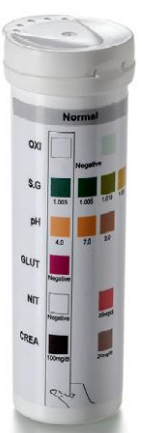

Urinkontroll
Kontrollera om urinen är manipulerad genom att doppa en Urin-ID-remsa i urinen. Avläs inom en minut och jämför med färgfälten på burken.

Att tänka på

- Minst en halv mugg urin
- Kroppsvarmt?
- Provet utspätt?
- Tillsatser?





ScreenyWeeny 5.0 SET Nordic White
Beauty



1 449 kr

KÖP NU



1 Pack

CleanUrin 100% Synthetic Urin25ml



95 kr

KÖP NU



Magnum Detox Instant Flush473 ml



459 kr

KÖP NU

Gör så här:

- Förvaras i rumstemperatur
- Häll över ca 0,5 cm urin i separat mugg för snabbtestet
- Ta av locket på testet och sätt ner i urinmuggen med 0,5 cm urin
- Läs av provet efter 1-10 minuter.
- Låt minst 5 minuter gå innan testet förklaras positivt!
- Se utbildningsfilm i analysportalen!




Variation på linjestyrkan

Snabbtester är antikropps-baserade så linjernas styrka kan variera, vilket är helt i sin ordning.

Minsta antydning till ett streck oavsett intensitet ska **alltid** tolkas som ett streck.

Linjestyrka

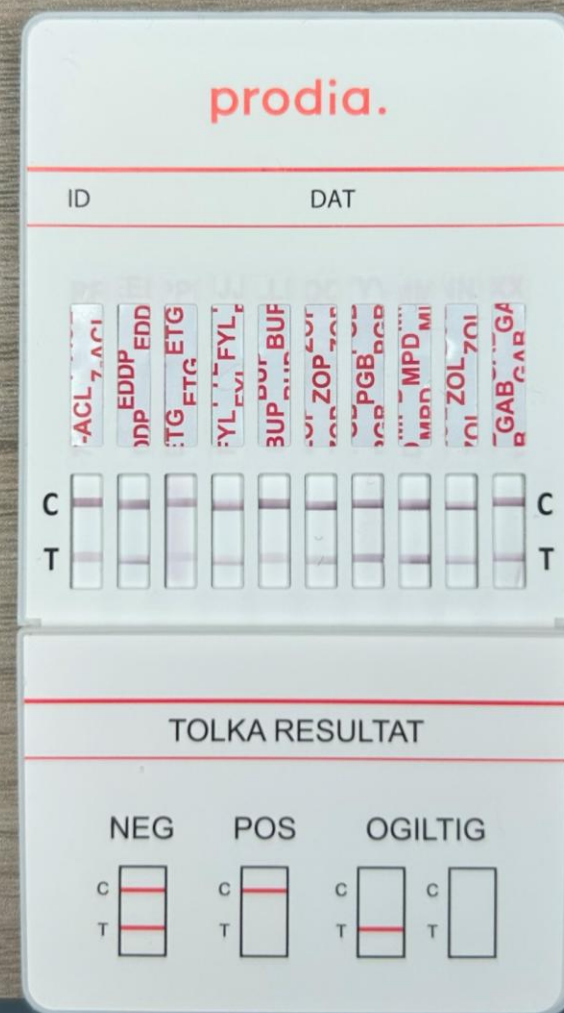

Korsreaktion

- Antikroppar - som nyckeln i ett lås
- Nyckeln (drogen/läkemedlet) passar endast in i ett speciellt lås (antikropp)
- Likhet med substansens molekylära uppbyggnad → korsreaktion




Sök efter korsreaktioner

- Läkemedel
- Droger
- Substans



En- VS tvåstegsanalys

prodia.

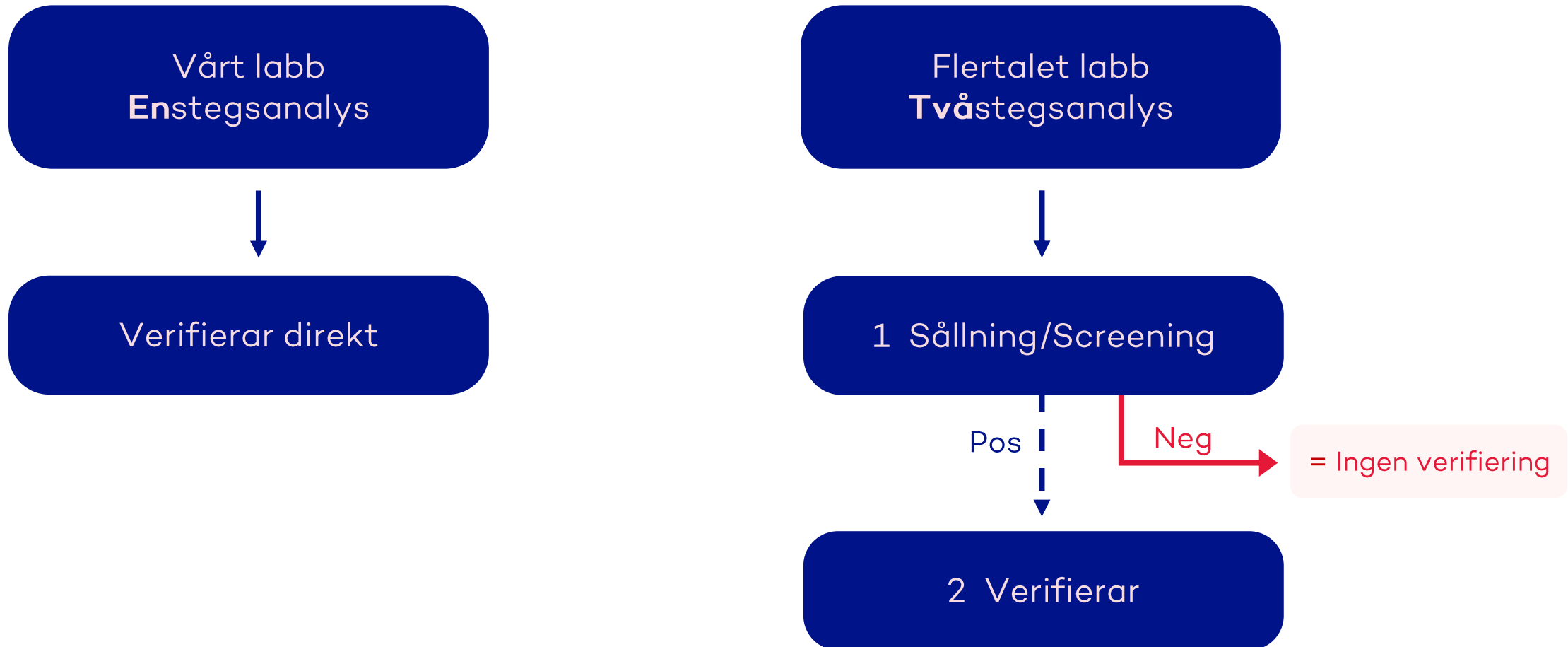



Arbetslivet



EWDTS sätter europeiska kvalitetsriktlinjer för hur arbetsplatsrelaterad drogtestning bör genomföras för att resultaten ska vara tillförlitliga och rättssäkra

Resultatet av drogtester kan förändra en människas arbetsliv. Därför är kraven på kvalitetssäkring extra stora när proverna hanteras.

Vi följer riktlinjer från European Workplace Drug Testing Society, EWDTS om hur man bör bedriva arbetsplatsdrogtestning i Europa.



Multianalys saliv

60

Analyserade droger från ett prov



Spårar väldigt brett



Snabb och enkel provtagning



Värnar integritet



Svår att manipulera




Juridiskt hållbar


Provtagnings saliv

prodia.


1

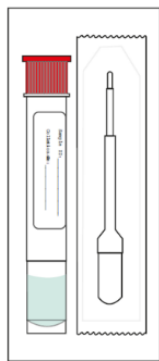


2

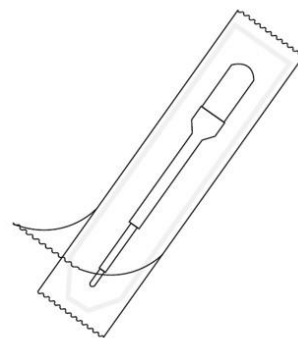


3

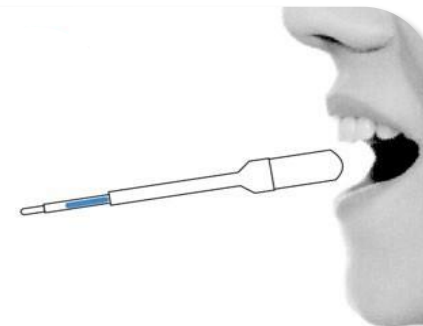

4

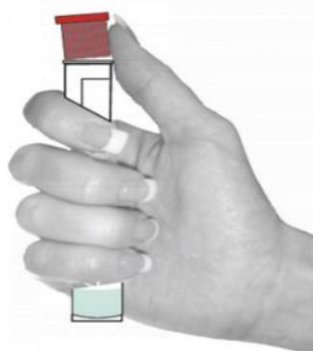

5

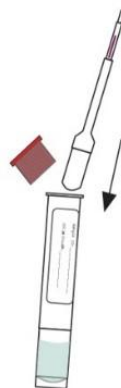

6



Nyanställning

- Stoppar missbruk tidigt
- Signaler om en drogfri arbetsplats
- Ni beslutar själv om tester, ingen facklig förhandling krävs
- Salivprov rekommenderas

Slumpmässigt

- Slumpmässiga drogtester är ett effektivt förebyggande verktyg
- Oannonserade tester utförs på slumpmässigt utvalda anställda
- Salivanalyser som används är juridiskt hållbara och spårar hela missbruket
- En genomarbetad alkohol- och drogpolicy krävs för att genomföra tester, skall MBL:as

Misstanke

- Drogmisshandlingssymptom liknar utbrändhetssymptom
- Drogtester vid misstanke ska ske med stor hänsyn till integriteten
- Ett misstanketest kan vara starten på en viktig dialog om mående och livsstil
- Bra att ha med i policy, men inget krav. Bra med rutiner

Slumpmässig drogtestning

- ✓ Uppdaterad alkohol- och drogpolicy
- ✓ Rutiner till policy
- ✓ MBL förhandling
- ✓ Oberoende part som utför testerna
- ✓ Juridiskt säkerställda svar – MRO läkare



Alkoholtest via utandning

- Alla Prodias mätare uppfyller standard för professionell användning EN15964
- Bränslecellsmätare med snabb nollställning
- Kalibrering
- Aldrig handsprit i samband med provtagning
- Dokumenterar uppmätt värde på remiss

Tack!

Team Prodia



+46 40-685 00 88



info@prodia.se



prodia.se

